


CTガイド下ドレナージキット Drainaway

販売名：CTガイド下ドレナージキット Drainaway

医療機器認証番号：303AFBZX00002000 クラス分類Ⅱ

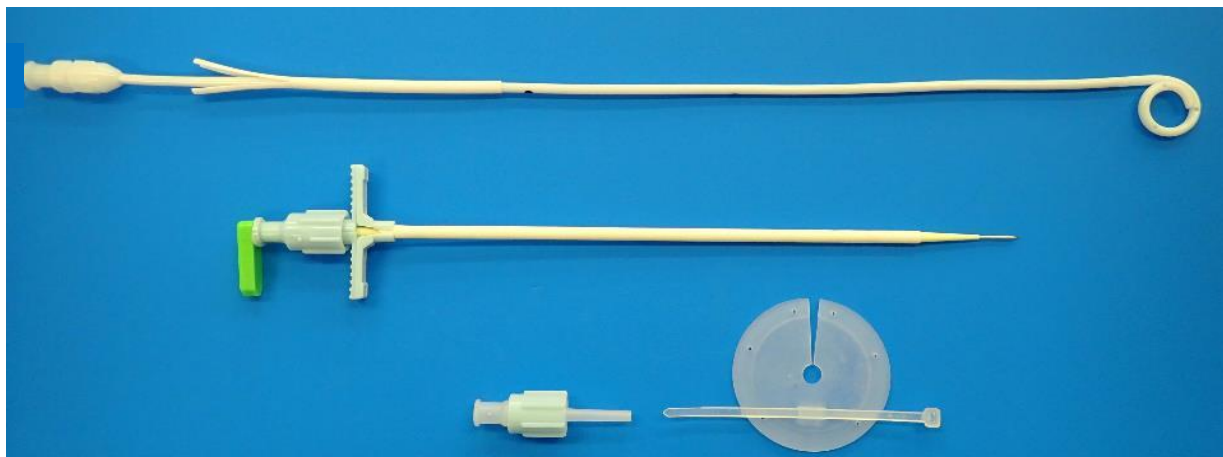

用途

- CTガイド下で経皮的に挿通ルートを確認し、膿瘍にカテーテルを留置して排膿・排液をするためのキットです。

特長

- CT室で完結するドレナージシステムです。
- ガイドワイヤーを使用せず処置を完結できる。CT装置のガントリースペースを考慮したコンパクト設計（シースダイレーター全長20cm、ピグテールカテーテル27cm）としています。
- 穿刺針はシースダイレーターより1.5cm出ています。針とシースダイレーターとの嵌合を緩めた設計のため、シースダイレーターを先行して鈍的に進めることが可能です。

【仕様】

管理医療機器 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 70306000
(カテーテル拡張器 32338000) (イントロデューサ針 12727020)

【EOG滅菌済】

製品番号	ドレナージカテーテル	穿刺針 シースダイレータ	その他 付属品	梱包単位	JANコード
MD-42308	ピグテール 8Fr	針 20G シースダイレータ 8Fr	吸引コネクター 固定板	2セット/ ケース	4545499071682

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824 大阪 ☎06-7659-2156
札幌 ☎0133-60-2400 名古屋 ☎052-726-8381
仙台 ☎022-742-2471 広島 ☎082-542-1381
北関東 ☎0495-77-2621 福岡 ☎092-624-0123

住友ベークライト株式会社と川澄化学工業株式会社は医療機器事業を2021年10月1日に統合し、「SBカワスミ株式会社」として新たにスタートしました。