


# LSGガイドチューブ

適切なスリーブ作成のアシスト  
 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術  
 専用ガイドチューブ



腹腔鏡下スリーブ状胃切除術における、胃切除のガイドとして用いる専用のデバイスです。

適度なチューブのコシ、チューブ先端の扁平バルーン、複数の側孔により、切除ラインを明確にして適切なスリーブ作成の補助となります。

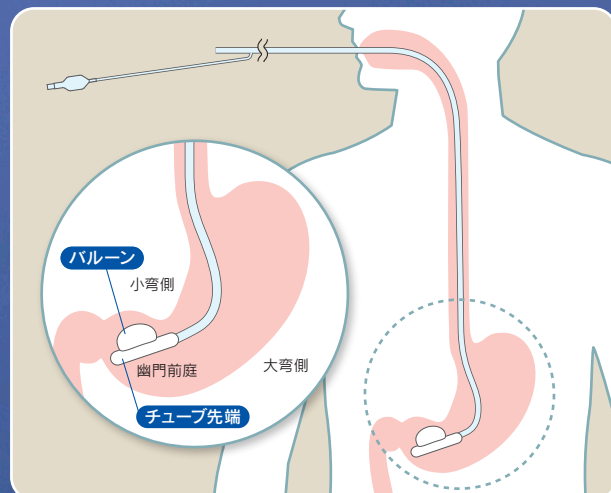

## 製品仕様

全体



先端部拡大



印刷表示 (バルーン膨張方向を示す)



先端チップ 扁平バルーン

- 1) チューブ先端側に片側扁平のバルーン
- 2) チューブ先端部にシリコンチップ付き
- 3) チューブ先端側に10個の側孔付き (先端から14.5cm)
- 4) チューブ先端から15~70cmまで5cm刻みで目盛り配置
- 5) チューブ外径: 36Fr、チューブ長90cm
- 6) バルーン最大容量: 50mL

## 特徴

- チューブに適度なコシがあり、胃内への挿入・位置調整が可能
- 先端バルーンを胃幽門前庭部に留置することで固定、チューブの直線化が容易
- 10個のチューブ側孔からの吸引により、胃切除時のガイドとなり切除ラインの視認が可能

販売名: LSG ガイドチューブ 医療機器承認番号: 30300BZX00160000

クラス分類II

| 製品番号     | チューブ径 | チューブ長 | バルーン容量 | 梱包単位   | JANコード        |
|----------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| MD-47800 | 36Fr  | 90cm  | 50mL   | 1本/ケース | 4545499072498 |

[EOG 滅菌済]

お願い

- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
- ・本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
- ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
- ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
- 有効期限切れのものは使用しないでください。

- ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
- ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
- ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

## 【製造販売業者】

# SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

## 【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824  
 札幌 ☎0133-60-2400  
 仙台 ☎022-742-2471  
 北関東 ☎0495-77-2621  
 大阪 ☎06-7659-2156  
 名古屋 ☎052-726-8381  
 広島 ☎082-542-1381  
 福岡 ☎092-624-0123