

ESD用 ディスポーザブルフード

# SBソフトフード

PAT.P




SBナイフJrタイプ/ショートタイプを  
強力にサポートする“ESD用ソフトフード”


## 特 長

- 独特な開口部の形状によりSBナイフとの干渉を最低限にし、回転・開閉操作が可能です。
- 効果的に側孔を配置し、フード内に溜まったガス、液体のフード外への排出を促進します。
- フード上面には傾斜を設け、粘膜下層への潜り込みがし易い形状になっております。

また、アンダーカットタイプはフードの下部を斜めにカットしてあり、潜り込み時にフード下部が手前の粘膜に干渉せず、潜り込み動作をサポートします。

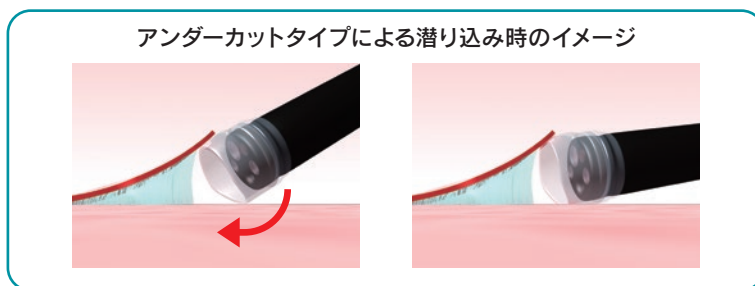

ストレートタイプ

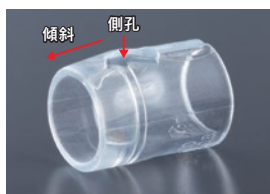

アンダーカットタイプ



## 仕 様

販売名：SBソフトフード 医療機器届出番号：14B1X10030000015

クラス分類 I

製品番号	タイプ	適用内視鏡径 (mm)	内視鏡からの突出長 (mm)	最大外径 (mm)	梱包単位	JANコード
MD-47950	ストレートタイプ	9.9-10.8	6	13.0	5個/ケース	4545499060631
MD-47951	アンダーカットタイプ		上部 6、下部 3.5			4545499060648
MD-47960	ストレートタイプ	11.7-12.3	6	14.8		4545499060655
MD-47961	アンダーカットタイプ		上部 6、下部 3.5			4545499060662
MD-47970	ストレートタイプ	12.8-13.2	6	15.9		4545499060679
MD-47971	アンダーカットタイプ		上部 6、下部 3.5			4545499060686

【EOG 滅菌済】

- お願い
- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
  - ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
  - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
  - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
  - ・有効期限切れのものは使用しないでください。
  - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
  - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
  - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
  - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824

札幌 ☎0133-60-2400

仙台 ☎022-742-2471

北関東 ☎0495-77-2621

大阪 ☎06-7659-2156

名古屋 ☎052-726-8381

広島 ☎082-542-1381

福岡 ☎092-624-0123