

リユーズブル
オートクレーブ滅菌対応

SB生検鉗子



経鼻(細径)内視鏡の動きを妨げず、
ストレスのない狙撃生検が可能です。


医療機器届出番号：14B1X1003000010

特長

- ・ コイル先端側が柔軟なため、経鼻（細径）内視鏡のアングル操作を妨げません。
- ・ 特に噴門部および胃体上部小弯の生検に有用です。
- ・ 新設計のカップ形状により、経鼻（細径）内視鏡用の小さなカップでも十分な量の組織採取が可能です。
- ・ 刃付加工を施したカップにより、採取組織の挫滅を軽減します。



仕様

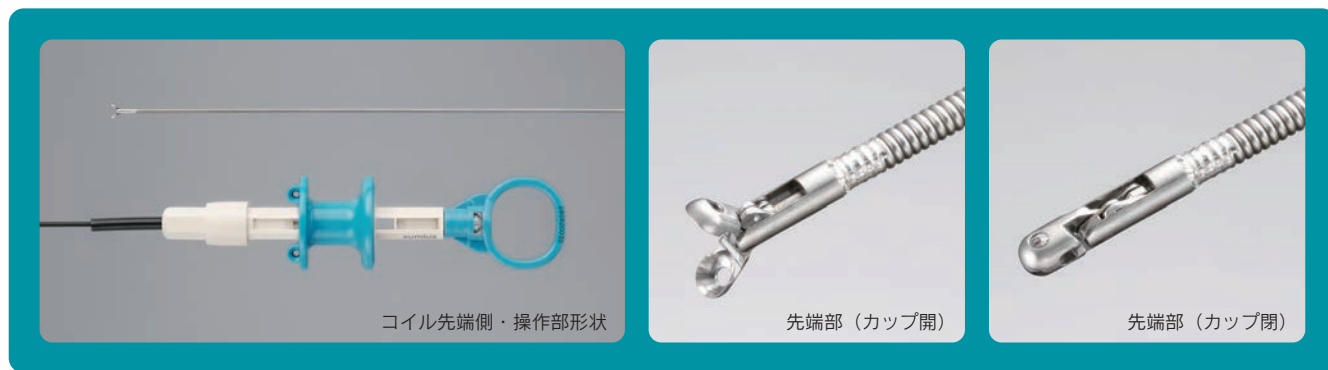

コイル先端側・操作部形状

先端部（カップ開）

先端部（カップ閉）

販売名：SB 生検鉗子 医療機器届出番号：14B1X10030000010

クラス分類 I

製品番号	有効長 (cm)	適応内視鏡チャンネル径 (mm)	挿入部最大外径 (mm)	梱包単位	JAN コード
MD-48318	160	φ2.0 以上	φ 1.85	1 本 / ケース	4545499056238

【未滅菌・オートクレーブ滅菌対応】

- お願い
- ・ 本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
 - ・ 本製品は、本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
 - ・ 本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
 - ・ 本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、使用しないでください。
 - ・ 本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - ・ 本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824
 札幌 ☎0133-60-2400
 仙台 ☎022-742-2471
 北関東 ☎0495-77-2621
 大阪 ☎06-7659-2156
 名古屋 ☎052-726-8381
 広島 ☎082-542-1381
 福岡 ☎092-624-0123