

# ジャバラ®大腸ステント

腫瘍に対するダメージ抑制を考慮した  
カバード大腸ステント



# ジャバラ®大腸ステント

## 特徴 ● カバードステント

カバー付きの大腸ステントです。フルカバード、パーシャルカバードをご選択いただけます。シリコン膜と補強布で構成されたカバーを有し、狭窄部を拡張します。

## ● 独自の構造による追従性


独自のステント構造によりラジアルフォースを発揮しながらも低アクシシャルフォースを実現し、屈曲した状態でもステント内腔を保持します。

## ● 純国産

すべて国内工場で生産しています。



## 仕様

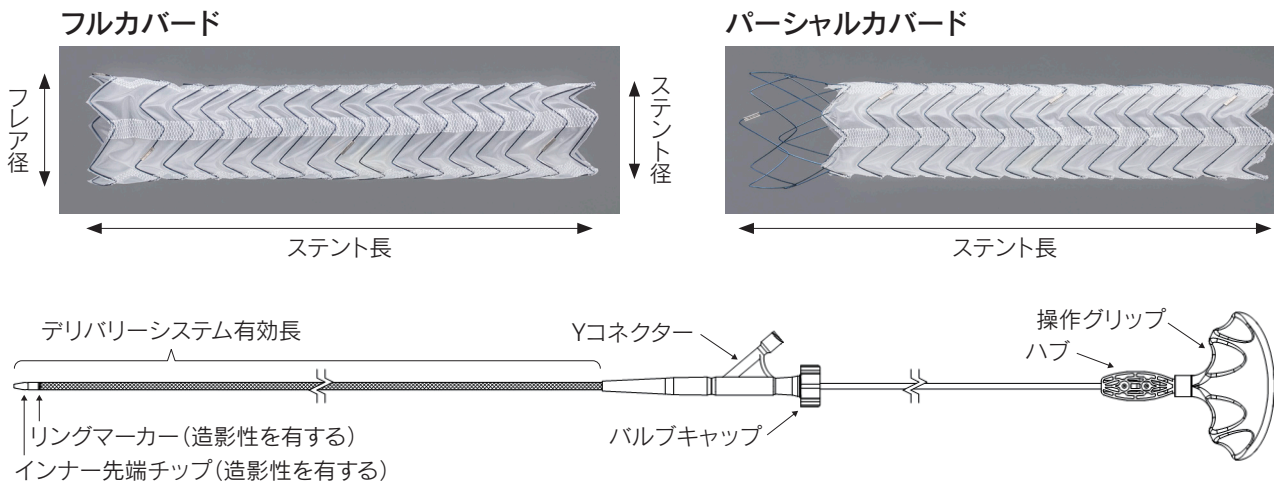

カタログ番号	JANコード	ステント				デリバリーシステム		推奨ガイドワイヤー (inch)
		カバータイプ	フレア径 (mm)	ステント径 (mm)	ステント長 (cm)	径 (Fr)	有効長 (cm)	
SF-2206FC*1	4987488085704	フルカバード	26	22	6	10.5	220	0.035
SF-2209FC	4987488085711				9			
SF-2212FC	4987488085728				12			
SF-2206PC*1	4987488085766	パーシャルカバード			6*2			
SF-2209PC*1	4987488085773				9*2			
SF-2212PC	4987488085780				12*2			

\*1:受注生産品番 \*2:ステント長のうち、ヘア部は約2cm

- 販売名：川澄ジャバラ大腸ステント
- 一般名称：大腸用ステント
- 医療機器承認番号：30100BZX00049000
- 特定保険医療材料：Ⅱ157 消化管用ステントセット (2) カバーあり
- クラス分類：高度管理医療機器 (クラスⅢ)

- ご使用の際には、電子添文をご確認の上ご使用ください。
- 形状および仕様は予告なく変更する場合があります。
- 「ジャバラ」はSBカワスミ株式会社の登録商標です。

### 【製造販売業者】

## SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

### 【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824  
札幌 ☎0133-60-2400  
仙台 ☎022-742-2471  
北関東 ☎0495-77-2621  
大阪 ☎06-7659-2156  
名古屋 ☎052-726-8381  
広島 ☎082-542-1381  
福岡 ☎092-624-0123