

クレーンTM 胆管ステント

高い狭窄突破能力

0.025Inchガイドワイヤー専用による
デリバリーシステムの細径化を実現。
ステント先端テーパ加工による挿入性の向上。

スムーズなステントリリース

従来にない新しい構造のデリバリーシステムを
採用し、リリース抵抗を軽減。



Crane

仕様

デリバリーカテーテルセット




チューブステント



特長

- 0.025inch ガイドワイヤー専用によりデリバリーシステムの細径化を実現しました。
- ステント先端テーパー加工により挿入性の向上が期待できます。
- 従来にない新しい構造のデリバリーシステムを採用しました。

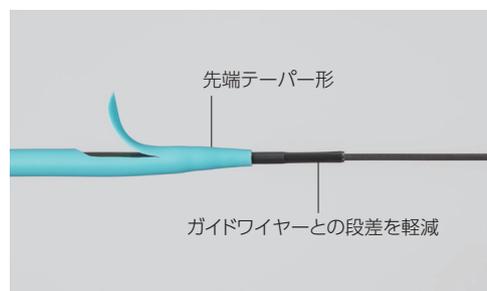

規格

品番	JANコード	形状	ステント		デリバリーシステム		
			外径 (Fr)	長さ (cm)	適合ガイドワイヤー (Inch)	カテーテル全長 (mm)	挿入部最大径 (mm)
P-0705ST(D)	4582142527462	ストレート	7	5	0.025	2000	2.8
P-0707ST(D)	4582142527479			7	0.025	2000	2.8
P-0710ST(D)	4582142527486			10	0.025	2000	2.8
P-0712ST(D)	4582142527493			12	0.025	2000	2.8
P-0715ST(D)	4582142527509			15	0.025	2000	2.8
P-0805ST	4573561594364		8.5	5	0.025	2000	3.4
P-0807ST	4573561594371			7	0.025	2000	3.4
P-0810ST	4573561594388			10	0.025	2000	3.4
P-0812ST	4573561594395			12	0.025	2000	3.4
P-0815ST	4573561594401			15	0.025	2000	3.4

- 販売名：ダイヤモンドステントセット
- 医療機器承認番号：21600BZZ00031A01
- 特定保険医療材料：胆道ステントセット(自動装着システム付・一時留置型)
- 一般名称：胆管用ステント

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- 記載は2025年4月時点の情報です。
- 「クレーン」はSBカワスミ株式会社の商標です。

販売業者

SBカワスミ株式会社

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号
TEL 044-589-8070 URL www.sb-kawasumi.jp

製造販売業者

シルックス株式会社

埼玉県川口市差間3-32-14